

【注意事項】

1. 本製品は滅菌済みディスポーザブル製品です。再使用はできません。
2. 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含有する薬液、油性成分を含む薬液、界面活性剤又はエタノール等の溶解補助剤を含む薬液の投与時に使用しないでください。薬液により三方活栓及びメスコネクターにひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性があります。特に全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性があります。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となります。
3. 本製品の延長チューブはポリ塩化ビニルを使用しています。脂溶性の薬液ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出する恐れがありますのでご注意ください。
4. 本製品は注入ポートから薬液が取り出せますので、麻薬を使用する場合、医療機関内での取り扱いとしてください。
5. 添付文書及び取扱説明書を必ずお読みになり、本製品をよくご理解した上で使用してください。
6. 設定する流量に関しては、対象部位、患者の体格と年齢、使用者の経験、技法を勘案して行ってください。
7. 包装が破損しているもの、その他汚染されている疑いのあるものは使用しないでください。
8. 使用前に本製品に傷や亀裂が無い、著しい劣化が無いかを点検してください。
9. 接続部は締め付け器具等で過度に締めすぎないでください。ひび割れが生じて薬液が漏れる恐れがあります。
10. 薬液の充填時はガラス片等の異物の混入にご注意ください。注入ポートからの液漏れの恐れがあります。
11. 本製品を使用する前に、カテーテル、チューブ、コネクターの接続状態やチューブの折れ等の点検を行い、正常に動作することを確認してください。また、患者に留置するカテーテルの再点検を行ってください。
12. 高い粘性又はエマルジョン状の薬液は使用しないでください。流量制御部の細管やエアVENTフィルターの目詰まりにより閉塞の原因になることがあります。
13. 投与する薬液のお取り扱い、該当する医薬品の添付文書に従ってください。
14. 本製品は静脈、硬膜外への注入以外に使用しないでください。動脈への注入は流量の低下や逆流の恐れがあります。
15. 高圧酸素室内では使用しないでください。過注入、液漏れ、破損の恐れがあります。
16. 注入ポート付近、エアVENTフィルター、コネクターには有機溶剤(アルコール等)が付着しないようにしてください。破損の原因になります。
17. 薬液充填後は注入ポートにキャップを必ず被せてください。
18. 液漏れ、液が流出しないなど、不具合が認められたものは使用を中止してください。
19. 本製品の表示流量は生理食塩水を用い、室温(23℃)で設定しています。薬液の濃度、粘度、温度等により流量は変化しますのでご注意ください。
20. 本製品の規定容量は200mLです。規定容量以外での使用は流量に影響を与える場合がありますのでご注意ください。
21. 接続されるカテーテルの長さ、内径、挿入部位等が流量に影響を与える場合がありますのでご注意ください。
22. 本製品に薬液を充填した後は速やかに注入を開始してください。薬液を充填したまま長時間放置すると流量に影響を与える場合がありますのでご注意ください。
23. 本製品は落下等の衝撃により破損の恐れがありますので大切にお取り扱いください。
24. 本製品を保管する場合には次の事項にご注意ください。
  - 水のかからない場所に保管してください。
  - 温度、湿度、風通し、日光、埃、塩分、イオウ分等を含んだ空気等により悪影響の生じる恐れのない場所に保管してください。
  - 振動、衝撃等、本製品の安定状態にご注意ください。
  - 化学薬品のそばやガスの発生するような場所に保管しないでください。
25. 結晶化する可能性がある薬剤を使用する際は、正常に注入が行われているかどうかを定期的に確認してください。輸液経路が閉塞されることがあります。

高度管理医療機器  
 一般的名称：加圧式医薬品注入器  
 医療機器承認番号：21400BZZ00497000  
 販売名：クーデックバルーンジェクター

## 取扱説明書


### 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ

# クーデック®バルーンジェクター®200 200mL/モノフロータイプ

この度は、クーデックバルーンジェクターをお買い上げ頂き、誠に有難うございます。

本製品を使用する際には、必ずこの取扱説明書と添付文書をお読み頂き、お取り扱いくださいますようお願い致します。

### 【製品構成・各部名称】

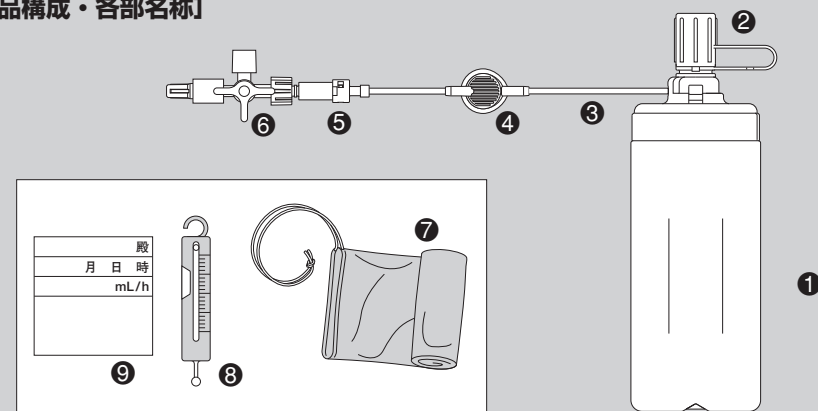

- |               |               |            |
|---------------|---------------|------------|
| ① バルーンジェクター本体 | ④ エアVENTフィルター | ⑦ キャリングバック |
| ② 注入ポート       | ⑤ モノフロー       | ⑧ 計量ストラップ  |
| ③ 延長チューブ      | ⑥ 三方活栓        | ⑨ 記名ラベル    |

製造販売業者

**大研医器株式会社**

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

2010/03 (社内管理番号: 0280450202)




医療社会を未来する——

**大研医器株式会社**

## 1 薬液を充填します。


1. 滅菌包装からクーデックバルーンジェクターを取り出し、三方活栓をクローズドにします。(図-1)
2. 注入ポートのキャップをねじりながら外します。(図-2)
3. シリンジに薬液を充填し、注入ポートにシリンジ先端を確実に差し込み、ゆっくりと注入します。

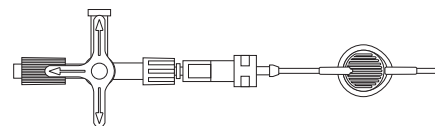

(図-1)

### ⚠ 注意：

- ※注入にはルアー式シリンジをおすすめします。
- ※シリンジのルアーロックの構造がメーカーによって若干異なっています。一部の製品は、バルーンジェクター本体の「注入ポート」に深く入り過ぎて、反回転だけではロックが解除できないことがあります。気が付かずにシリンジを引抜いた場合、「注入ポート」が外れることがあります。
- ※充填に使用するシリンジには注射針を使用しないでください。
- ※薬液の充填操作は無菌的に行ってください。
- ※薬液は規定容量の200mLを充填してください。
- ※投与する薬液のお取り扱い、該当する医薬品の添付文書に従ってください。
- ※薬液の濃度、粘性、温度などにより流量は変化します。

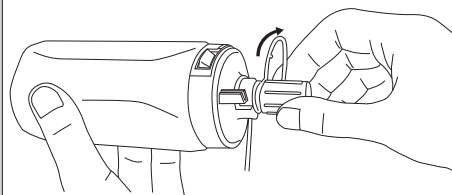

(図-2)

4. 薬液の注入が終了した後、バルーンジェクター本体からシリンジをねじりながら取り外します。
5. 注入ポートのキャップを台座の凹凸に合わせて、しっかりと被せてください。

## 2 カテーテルに接続します。

1. 三方活栓をオープンにし、先端より薬液が出てくることを確認します。
2. 三方活栓先端にカテーテルを接続します。

### ⚠ 注意：

- ※接続するカテーテルの添付文書をよくお読みください。
- ※本製品とカテーテルの間にフィルターを接続する場合は、フィルター内のエアロックによる注入量低下や注入停止を防止するため、エアバント機能付きのフィルターをおすすめします。


3. 必要に応じキャリングバッグに入れます。

## 3 必要に応じ薬液残量を量ります。

1. バルーンジェクター本体に計量ストラップを引っ掛け、指標を下まで引き伸ばした後に計量してください。(図-3)

### ⚠ 注意：

- ※計量ストラップは目安としてご利用ください。

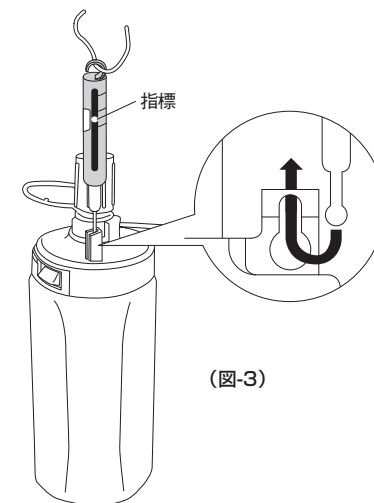

(図-3)